



FRED easy

Public Access Defibrillator der neuesten Generation
mit Multipulse Biowave plus

Mit dem neuen halbautomatischen Defibrillator FRED easy wird die Wiederbelebung noch einfacher und effizienter:

Dank der einzigartigen, biphasisch gepulsten Defibrillationskurve **Multipulse Biowave plus** wird für eine erfolgreiche Defibrillation durchschnittlich nur noch 1/3 der bisher mit monophasischem Impuls benötigten Energie verwendet.

Diese neue, sanfte Art der Wiederbelebung kann die Überlebenschancen bei Herz-/Kreislaufstillstand erheblich steigern.




- **Großes hintergrundbeleuchtetes LCD - Display** (4-zeilig, 100 x 37 mm) mit ausführlichen Textanweisungen, Anzeige der genauen Batteriekapazität in %
- Klare gesprochene Anweisungen
- In Zusammenarbeit mit Österreichischen Rettungsdiensten speziell angepasste Benutzerführung (Sprache und Text, z.B. "Rettungsnotruf 144", "2 Beatmungen und 15 Herzdruckmassagen", etc.)
- Einfache **2-Knopf Bedienung**
- **Schnelle Aufladezeit** (unter 10 Sekunden)
- Einzigartig schonende Defibrillationskurve **Multipulse Biowave plus** (biphasisch gepulster, modulierter Defibrillationsimpuls) für eine minimale Belastung des Herzens

- Wartungsfreie Lithium-Batterie garantiert **5 Jahre Bereitschaft** im Standby-Modus bzw. 200 Schocks oder 8 Stunden Betriebsdauer
- **LED-Statusanzeige** erlaubt einfache Kontrolle der Einsatzbereitschaft.
- Speicherung und Auswertung von EKG-Daten, Sprache und Events über **SD-Card** möglich
- Einfaches Software-Update ermöglicht Anpassung auch an zukünftige Guidelines und Reanimations-Algorithmen

- Komplet und einsatzbereit mit Tasche, Li-Batterie und 1 Paar Defibrillationselektroden
- Gewicht: ca. 1,5 kg, Größe: 230 x 220 x 70 mm (ohne Tasche)
- Best.Nr.: MFRED EASY



Einfache 2-Knopf Bedienung

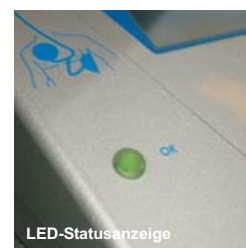

LED-Statusanzeige



Speicherung auf SD-Card

Zubehör / Ersatzteile für FRED easy

- Wandhalterung für FRED easy, Best.Nr.: MEASY-WANDHALTERUNG
- Koffer für Wandmontage, spritzwassergeschützt und verplombbar, Best.Nr.: MVAL 40144
- Lithium Batterie, Betriebsdauer im Standby-Modus 5 Jahre, Best.Nr.: MEASY BAT
- 1 Paar Defibrillationselektroden, Best.Nr.: MEASY ELEC

Exklusivvertrieb von Schiller Defibrillatoren in Österreich:

CHEMOMEDICA

Medizintechnik und Arzneimittel Vertriebsges.m.b.H.

A-1013 Wien, Wipplingerstraße 19 e-Mail: office@chemomedica.at
Tel: 01-533 26 66-0 Fax: 01-535 33 06-58 Internet: www.chemomedica.at