

DATENBLATT

Die Ambu® Transparente Silikon-Gesichtsmaske ist für die Verwendung mit manuellen Beatmungsbeuteln, Anästhesieschläuchen und automatischen Beatmungsgeräten konzipiert.

Die Ambu® Transparente Silikon-Gesichtsmaske verfügt über einen flexiblen Cuff aus 100 % Silikon, der für eine dichte und dennoch komfortable Abdichtung sorgt. Der Cuff ist selbstfüllend, und der Druck innerhalb des Cuffs kann reguliert werden (außer bei Größe 0A). Ein transparenter Maskendom ermöglicht eine visuelle Kontrolle des Zustands des Patienten und eine integrierte Daumenstütze unterstützt die Handpositionierung während der Beatmung.

Die Ambu® Transparente Silikon-Gesichtsmaske kann bis zu 30 Mal wiederaufbereitet werden. Sie ist sowohl für die manuelle als auch für die maschinelle Reinigung und Sterilisation geeignet und kann bei einer Temperatur von 134 °C autoklaviert werden (außer Größe 0A). Der flexible Cuff ist abnehmbar, um eine gründliche Reinigung zu ermöglichen.

Ambu® Transparente Silikon-Gesichtsmaske



DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

Bis zu 30 mal wiederaufbereitbar

MR-sicher

Transparenter Maskendom für visuelles Prüfen von Blut, Erbrochenem und Spontanatmung

Daumenstütze zur Unterstützung der Handposition für eine gute und einfache Abdichtung

Komfortables Design und Textur

Flexibler Cuff aus 100 % Silikon, der zur umfassenden Reinigung abgenommen werden kann

Geeignet zum Autoklavieren bei einer Temperatur von 134 °C (außer Größe 0A)

Erhältlich in 6 Größen

Ambu

BESTELLINFORMATIONEN


Artikelnummer	Typ
000 313 000	Ambu® Transparente Silikon-Gesichtsmaske Gr. 0A
000 315 000	Ambu® Transparente Silikon-Gesichtsmaske Gr. 0
000 316 000	Ambu® Transparente Silikon-Gesichtsmaske Gr. 2
000 312 000	Ambu® Transparente Silikon-Gesichtsmaske Gr. 3/4
000 317 000	Ambu® Transparente Silikon-Gesichtsmaske Gr. 5
000 319 000	Ambu® Transparente Silikon-Gesichtsmaske Gr. 6

MATERIALIEN

Produkt	Material
Cuff	Silikongummi
Cuff Gr. 0A	Silikongummi mit Schaumfüllung
Maskendom	Polysulphon
Masken-Konnektor	Silikongummi

Größe

Typ	Gewicht
0A	28 g
0	38 g
2	63 g
3/4	78 g
5	105 g
6	105 g

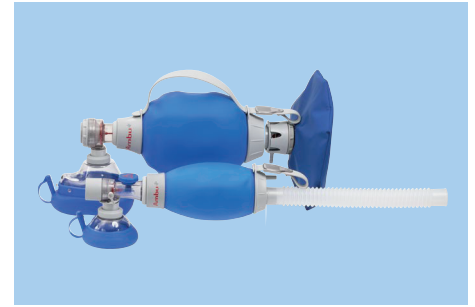

Ambu® Transparente
Silikon-Gesichtsmaske angeschlossen an
den Ambu Mark IV Beatmungsbeuteln



Ambu® Transparente
Silikon-Gesichtsmaske angeschlossen an
den Ambu Oval Plus Beatmungsbeuteln

Ambu

Ambu GmbH
Steinkopfstraße 4
61231 Bad Nauheim
Deutschland
Tel. +49 (0) 60 32/92 50-0
ambu.de

🏢 **Ambu A/S**
Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
ambu.com

CE₂₇₉₇ US: Rx only