


EASY PULSE®

Maschinelle HLW, effizient und kompakt
dank technologischer Innovation


Neuste Generation
automatischer
HLW-Geräte

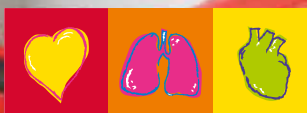

SCHILLER
The Art of Diagnostics

EASY PULSE®

SCHILLER hat mit der Lancierung des unglaublich kleinen und leichten mechanischen Thoraxkompressionsgerätes den nächsten Schritt zur Verbesserung der HLW-Qualität gemacht – der EASY PULSE.

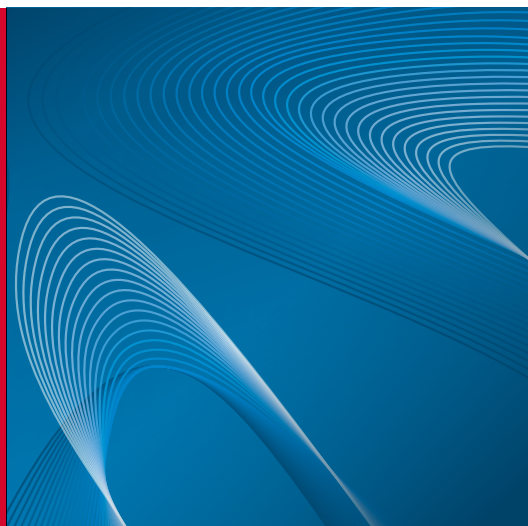

Die manuelle Herzdruckmassage über längere Zeit korrekt auszuführen ist fast unmöglich. Einerseits ist ein enormer Kraftaufwand nötig, andererseits müssen gleichzeitig weitere Aufgaben wie z. B. die Überwachung der Vitalparameter wahrgenommen werden können.

Der EASY PULSE von SCHILLER ist die Lösung für eine effizientere Reanimation: Ein tragbares Gerät, welches die Herzdruckmassage automatisch mit gleichbleibender Drucktiefe und konstanter Frequenz autonom ausführt. Die Umgebungsbedingungen werden dabei zweitrangig, da dieses System direkt am Patientenoberkörper angebracht wird und so in beliebigen Situationen arbeiten kann. Insbesondere während des Transports ist die qualitativ hochstehende und ununterbrochene Herzdruckmassage sichergestellt.

Der EASY PULSE zeichnet sich ausserdem durch seine äusserst einfache Anwendung aus und kann dadurch von einer einzigen Person bedient werden. Seine Grösse und sein Gewicht sind bestechend: Der EASY PULSE wiegt weniger als 3,5 Kilogramm. Dies eröffnet völlig neue Möglichkeiten, beispielsweise in der Luftrettung.

NEUSTE GENERATION AUTOMATISCHER HLW-GERÄTE

Der EASY PULSE verwendet die einzigartige Kombination von Stempel und Band, wodurch eine 3D-Kompression und somit maximale Effizienz möglich ist.

Das Gewicht des Gerätes ist gleichmässig auf die Grundplatte verteilt und konzentriert sich nicht auf einen Punkt, so dass die Herzdruckmassage und Entlastung nicht beeinflusst werden.



SLIDER

Dank des Sliders wird die Vorbereitung des Patienten für die mechanische Herzdruckmassage signifikant erleichtert. Durch das praktische Schnallensystem dauert die Anbringung bei geübtem Personal weniger als 15 Sekunden.



LADESTATION

Die Ladung des Akkus kann in einer Doppelladestation (weniger als 2 Stunden) oder im Turbomodus (weniger als 50 Minuten) erfolgen. Eine Ladung ist ausreichend für ca. 45 Minuten.



BEDIENUNG

Im Notfall muss jeder Handgriff sitzen. Dank der übersichtlichen und intuitiven Bedienung reichen zwei Tastendrucke aus um die Reanimation sofort zu starten.



EXTERNE STROMVERSORUNG UND DIREKTES ANSCHLUSSKABEL

Für den Betrieb von 100 VAC – 240 VAC, wird ein entsprechendes Netzteil mitgeliefert. Der EASY PULSE kann über ein spezielles Anschlusskabel ab einer Spannungsquelle mit 12 VDC – 48 VDC direkt betrieben werden.

TECHNOLOGISCHE INNOVATIONEN

Leicht

- ❖ Unglaublich kleines und leichtes, elektrisch betriebenes HLW-Gerät, wiegt bloss 3,5 kg
- ❖ Ideal bei limitierten Platzverhältnissen

Ganzheitlich

- ❖ Multidirektionale Herzdruckmassage (3D)
- ❖ Gleichbleibend hohe Qualität der Herzdruckmassage: Gleichmässige Frequenz und Druck, was bei manueller Herzdruckmassage praktisch unmöglich ist
- ❖ Möglichkeit des 30:2 Kompressions-Beatmungszyklus

Einfach

- ❖ Dank dem Slider und Gurtensystem kann das Gerät einfach am Oberkörper des Patienten befestigt werden
- ❖ Einfach anzulegen – einfach anzuwenden

Zusätzliche Ausstattung

- ❖ Austauschbarer Akku mit Ladezustandsanzeige
- ❖ Autonomer Betrieb während typischerweise 45 Minuten (mit einem Akku)
- ❖ Anschlüsse: Externer DC-Eingang, USB



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schillerla.ch
www.schillerla.ch



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



CHEMOMEDICA

Medizintechnik und Arzneimittel Vertriebsges.m.b.H.

Chemomedica, 1016 Wien, Wipplingerstraße 19, Postfach 40
Telefon: +43 (1) 533 26 66 - 0 * Fax: +43 (1) 533 26 66 - 58
e-mail: office@chemomedica.at * Website: www.chemomedica.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment
Co., Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86 010 52007020
Fax +86 010 52007020-8016
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
Schiller medicinski instrumenti d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 63 36 49
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 1 383 4780 / +36 1 460 9491
Fax +36 1 383 4778
info@schillerhungary.hu
www.schillerhungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
Fax +48 22 843 20 89
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 956 29 10
mail@schiller.ru
www.schiller.ru
www.schiller-cis.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK
Bellshill, ML4 3PR
Phone +44 1698 744 505
Fax +44 1698 744 474
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

